

AcuEar Pebble

User Manual



Model No.: PHA-126M



Table of Contents

DE

Produktvorstellung (Kopfhörer)	14
Produktübersicht	14
Tastenfunktionen	15
LED Anzeigen	16
Produktvorstellung (Tischmikrofon und Ladekoffer 2-in-1) 16	
Produktüberblick	16
Tastenfunktionen	17
LED Anzeigen	17
Aufladen der Kopfhörer und der Box	18
Verwendung als Bluetooth TWS-Kopfhörer	19
Verwendung als Hörverstärker mit dem Tischmikrofon ...	20
Verwendung eines einzelnen Kopfhörers	22
Technische Daten	22
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	23
Kontaktieren Sie uns	57

Produktvorstellung (Kopfhörer)

Produktübersicht

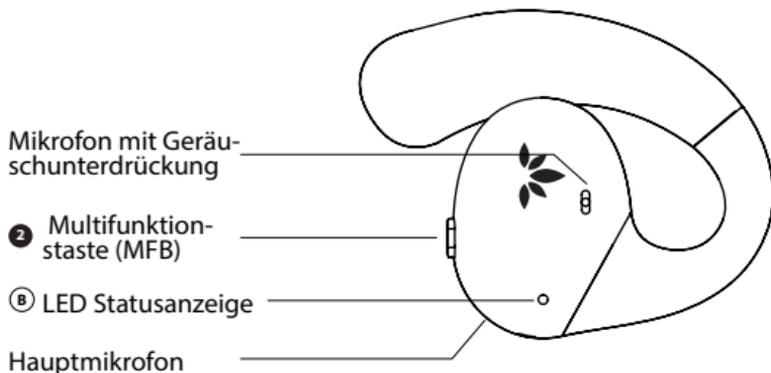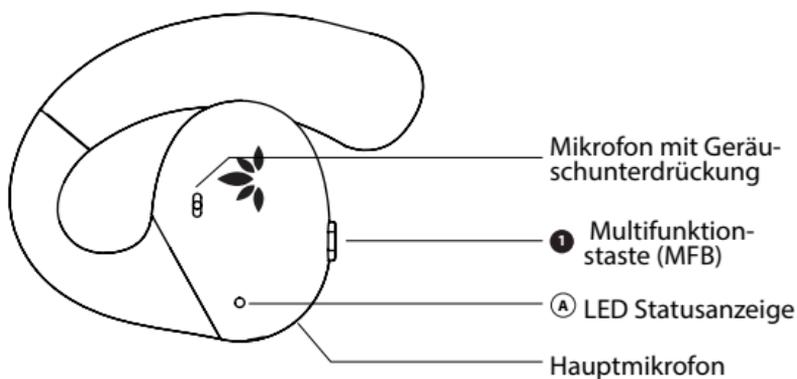

Tastenfunktionen

DE


Nr.	Taste	Funktionen
1 oder 2	MFB am L / R Kopfhörer	Doppeltippen für Wiedergabe/Pause
		Zweimaliges Tippen, um den Anruf anzunehmen
		Zweimaliges Tippen, um den Anruf zu beenden
		2 Sekunden gedrückt halten, um den Anruf abzulehnen
		5 Sekunden gedrückt halten, um ein-/ auszuschalten
		Bei Verwendung eines einzelnen Kopfhörers 1x tippen für 8 Lautstärkestufen
1	MFB am L Kopfhörer	Bei Verwendung beider Kopfhörer 1x tippen, um die Lautstärke zu verringern
2	MFB am R Kopfhörer	Bei Verwendung beider Kopfhörer 1x tippen, um die Lautstärke zu erhöhen


LED Anzeigen

Nr.	Anzeigen & Sprachansage	Status
A	Durchgehend Blau für 1 Sekunde	Eingeschaltet
	Durchgehend Rot für 1 Sekunde, dann aus	Ausgeschaltet
	Durchgehend Blau für 5 Sekunden, dannaus, Sprachansage "CONNECTED" oder "HEARING MODE"	Verbunden
	Durchgehend Rot	Lademodus
	LED aus	Voll aufgeladen
	Blinkt abwechselnd Rot und Blau, Sprachansage "PAIRING"	Kopplung

Produktvorstellung (Tischmikrofon und Ladekoffer 2-in-1)

Produktüberblick

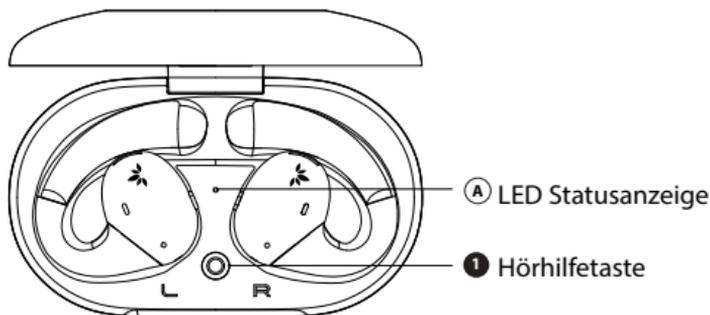

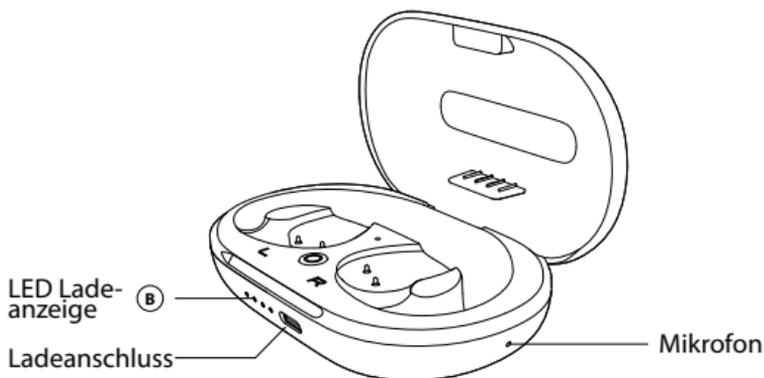

Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1		2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Hörhilfemodus ein-/auszuschalten


LED Anzeigen

Nr.	Anzeigen & Sprachansage	Status
A	Durchgehend Blau	Hörhilfetaste an
	Durchgehend Rote Licht für 1 Sekunde, dann aus	Hörhilfetaste aus
	Abwechselnd Blaues & Rotes Blinklicht	Kopplungsmodus
B	Weißes Blinken im Sekundentakt	Lademodus
	Vier LEDs leuchten durchgehend weiß	Voll aufgeladen

Aufladen der Kopfhörer und der Box


So laden Sie die Kopfhörer auf:

Legen Sie die Ohrhörer in die Hülle und schließen Sie die Hülle. Ein rotes Lämpchen auf den Kopfhörern zeigt an, dass der Ladevorgang läuft; sobald das Lämpchen erlischt, ist der Akku voll.

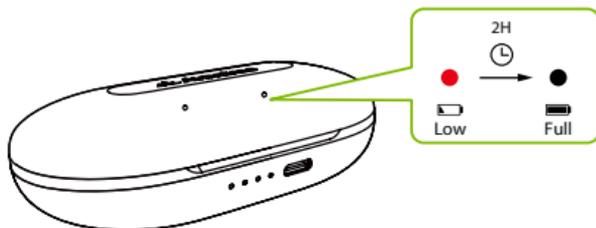

Zum Aufladen der Box:

Wenn die Batterie Ihres Gehäuses leer ist, blinken die 4 LEDs am Gehäuse weiß, wenn Sie es öffnen und wieder schließen. Zum Aufladen schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel am Ladeanschluss an und verbinden das andere Ende mit einem USB-Adapter (5V/500mA-2A, z. B. Ihr Handy-Ladegerät) oder einem USB-Anschluss am PC.

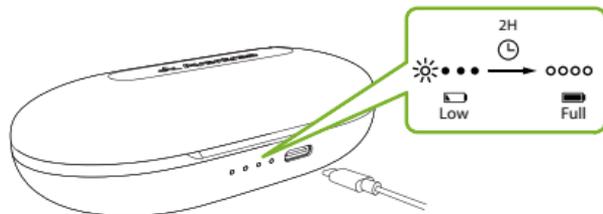


Die LED-Ladeanzeigen der Box blinken weiß, um den Ladestatus anzuzeigen. Bei voller Ladung leuchten die vier LEDs kontinuierlich weiß.

Verwendung als Bluetooth TWS-Kopfhörer

DE

SCHRITT 1

Ziehen Sie den Aufkleber ab und legen Sie die Kopfhörer in die Ladebox. Beim Herausnehmen wechseln die Kopfhörer automatisch in den PAIRING-Modus, erkennbar am Blinken der blauen und roten LEDs.

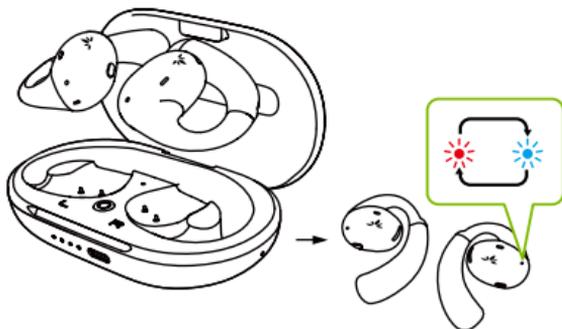

SCHRITT 2

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und wählen Sie „Avantree AcuEar Pebble“ im Bluetooth-Menü.

SCHRITT 3


Halten Sie die Kopfhörer in die Nähe Ihres Geräts und warten Sie 5-10 Sekunden oder bis sie sich verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED-Anzeige beider Kopfhörer 5 Sekunden lang blau und erlischt dann.

Für die spätere Verwendung klicken Sie einmal auf die MFB-Taste, um die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wiederherzustellen, oder wählen Sie „Avantree AcuEar Pebble“ im Bluetooth-Menü Ihres Geräts.

Verwendung als Hörverstärker mit dem Tischmikrofon


DE

Das Tischmikrofon nimmt die Stimmen der Besprechungsteilnehmer auf und sendet sie direkt in Ihre Ohren.

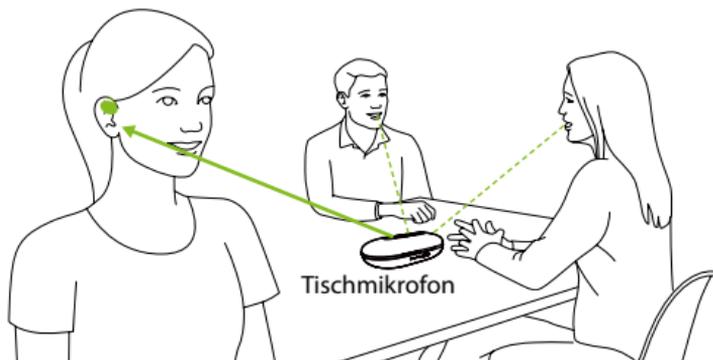


SCHRITT 1

Drücken Sie die Taste "Hear Assist" am Tischmikrofon 2 Sekunde lang. Das Tischmikrofon wechselt in den Hörmodus, was durch das BLAUE Blinken der LED angezeigt wird.

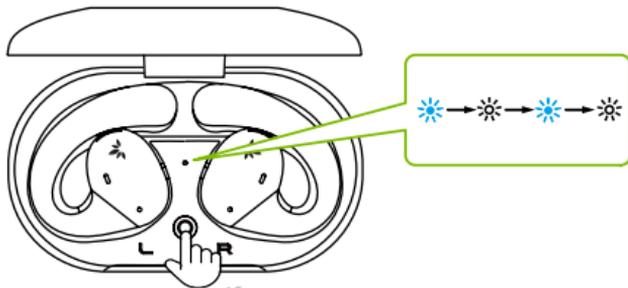

SCHRITT 2

Warten Sie einige Sekunden lang. Das Tischmikrofon und die Kopfhörer sind erfolgreich verbunden, was durch das durchgehende BLAUE Leuchten der LED am Etui angezeigt wird.

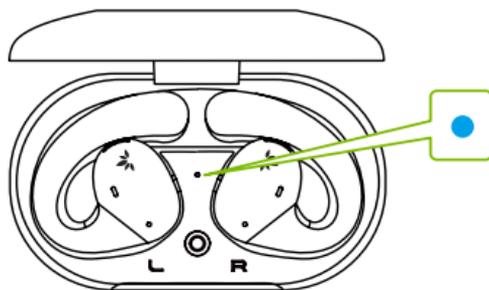

HINWEIS: Das Mikrofon hat normalerweise eine Reichweite von bis zu 10 Metern / 33 Fuß zum Hörverstärker. Beachten Sie jedoch, dass menschliche Körper und Wände die Reichweite verringern können. Um die Reichweite zu maximieren, stellen Sie sicher, dass das AcuEar Pebble Mikrofon im direkten Sichtkontakt (Sichtlinie) ist.

Umschalten in den Bluetooth-Modus

Halten Sie die "Hear Assist"-Taste am Tischmikrofon 2 Sekunde lang gedrückt, um es auszuschalten. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Bluetooth-Modus. Danach können Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts "Avantree AcuEar Pebble" auswählen.

Verwendung eines einzelnen Kopfhörers

Der linke und rechte Kopfhörer können separat verwendet werden. Bei Verwendung eines einzelnen Kopfhörers können Sie einmal auf die Taste tippen, um zwischen 8 Lautstärkestufen zu wechseln.

Technische Daten

Kopfhörer

BT Version	v5.3
Audio-Codec-Unterstützung	LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC
Spielzeit	Bis zu 10 Std.
Spielzeit mit Ladebox	Bis zu 35 Std.
Ladezeit	2 Std.
Ohrhörer-Treiber	16,5 mm
Impedanz	22Ω
Gewicht	26 g

Tismikrofon & Ladebox

Bluetooth Version	v5.3
Audio-Codec-Unterstützung	LC3
Spiezeit	Bis zu 56 Std.
Ladezeit	2 Std.
Gewicht	78 g

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

DE

Hier sind einige der häufig gestellten Fragen während der Einrichtung:

Die Kopfhörer können nicht mit dem Tischmikrofon verbunden werden.

- Versetzen Sie die Ohrhörer in den Pairing-Modus – Legen Sie die Ohrhörer in die Hülle und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aus. Die Ohrhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus, was durch BLAU und ROT blinkende LED angezeigt wird.
- Versetzen Sie das Gehäuse in den Kopplungsmodus. Halten Sie bei ausgeschaltetem Gehäuse die Taste am Gehäuse 5 Sekunden lang gedrückt oder bis die LED BLAU und ROT blinkt.
- Halten Sie die Ohrhörer und das Gehäuse zusammen, dann verbinden sie sich miteinander.

Hören Sie nur über einen Kopfhörer/einen Seitenton

Wie stelle ich die Lautstärke der Kopfhörer ein?

Die Ohrhörer können nicht mit dem Tischmikrofon verbunden werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen korrekt befolgt haben. Falls das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie unsere vollständige FAQ-Liste unter avantree.com/support/acuear-pebble oder kontaktieren Sie uns direkt für weitere Hilfe.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/acuear-pebble



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: PHA-126M

Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-126M-V1