

AcuEar Pebble

User Manual



Model No.: PHA-126M



Índice de Contenido

Introducción del Producto (Auriculares)	47
Descripción del producto	47
Función de las Teclas	48
Indicadores LED	49
Introducción del Producto (Micrófono de mesa y estuche de carga 2 en 1)	49
Descripción del Producto	49
Función de las Teclas	50
Indicadores LED	50
Cargar los Auriculares y el Estuche	51
Usar como Auriculares Bluetooth TWS	52
Usar como Amplificadores Acústicos con el Micrófono de Escritorio	53
Usar como un Solo Auricular	55
Especificaciones	55
FAQ	56
Contáctenos	57

Introducción del Producto (Auriculares)

Descripción del producto

ES

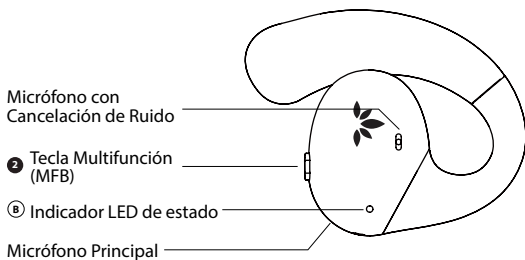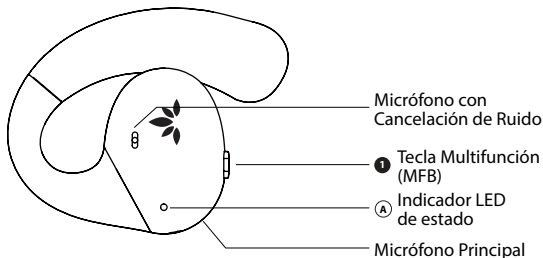

Función de las Teclas


No.	Tecla	Función
1 or 2	MFB en el auricular izquierdo /derecho	Toca dos veces para reproducir/pausar
		Toca una vez para aceptar la llamada
		Toca dos veces para finalizar la llamada
		Mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar la llamada
		Mantenga presionado durante 5 segundos para encender/apagar
1	MFB en el auricular izquierdo	Cuando use ambos auriculares, toque una vez para disminuir el volumen
2	MFB en el auricular derecho	Cuando use ambos auriculares, toque una vez para aumentar el volumen


Indicadores LED

No.	Indicador y Comentarios de Voz	Estado
A	Azul fijo durante 1 segundo	Encendido
	Rojo fijo durante 1 segundo y luego apagado	Apagado
	Azul fijo durante 5 segundos y luego apagado, indicador de voz "CONNECTED" o "HEARING MODE".	Conectado
	Rojo sólido	Cargando
	LED apagado	Carga completada
	Parpadea en rojo y azul alternativamente, indicador de voz "PAIRING".	Emparejamiento

Introducción del Producto (Micrófono de mesa y estuche de carga 2 en 1)

Descripción del Producto

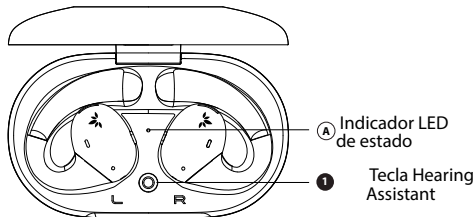

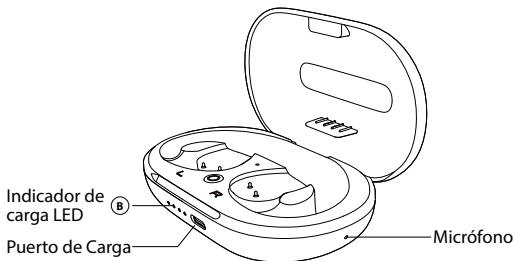

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Mantenga presionado durante 2 segundos vez para activar/desactivar el modo Hear Assist (Amplificador Acustico).


Indicadores LED

No.	Indicador y Comentarios de Voz	Estado
A	Azul solido	Hear Assist encendido
	Rojo fijo durante 1 segundo y luego apagado	Hear Assist apagado
	Rojo y azul parpadeando alternativamente	Modo de emparejamiento
B	Parpadea en blanco cada segundo	Cargando
	Blanco fijo en los cuatro LED	Carga completada

Cargar los Auriculares y el Estuche


Para cargar los auriculares:

Coloque los auriculares en el estuche y luego ciérralo. Las luces LED rojas fijas en los auriculares indican que la carga está en progreso; Una vez que se apaguen las luces, la batería de los auriculares estará completamente cargada.

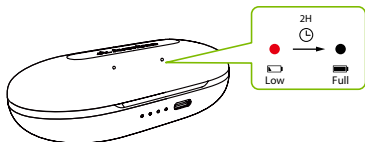

Para recargar el estuche:

Si su estuche se queda sin batería, cuando lo abra y luego lo cierre, los 4 LED del estuche parpadearán en blanco y deberá recargarlo para poder cargar sus auriculares. Conecte el cable de carga USB C, incluido en el paquete, al puerto de carga, luego conecte el otro extremo a un adaptador USB de 5V/500mA-2A (un cargador de teléfono o similar debería funcionar) o un puerto USB de su PC.

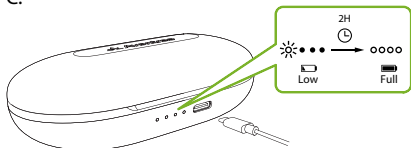


Los indicadores LED de carga en el estuche parpadearán en blanco para indicar el estado de carga. Cuando esté completamente cargada, los cuatro LED se volverán de color blanco fijo.

Usar como Auriculares Bluetooth TWS

PASO 1

Una vez retirados del estuche de carga, los auriculares ingresarán automáticamente al modo EMPAREJAMIENTO, indicado por el LED parpadeando en AZUL y ROJO.

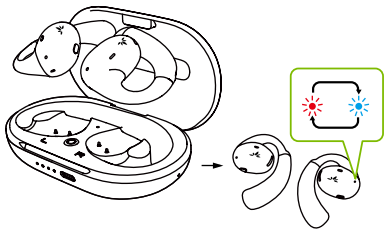

PASO 2

Encienda el Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Avantree AcuEar Pebble" en el menú de Bluetooth.

PASO 3


Mantenga los auriculares cerca del dispositivo y espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado correctamente, el indicador LED de ambos auriculares se volverá azul fijo durante 5 segundos y luego se apagará.

Para uso posterior, haga clic en el botón MFB una vez para volver a conectarse al último dispositivo emparejado o seleccione "Avantree AcuEar Pebble" en el menú Bluetooth de su dispositivo.

Usar como Amplificadores Acústicos con el Micrófono de Escritorio


El micrófono de mesa capta las voces de los participantes de la reunión y las envía directamente a sus oídos.

ES

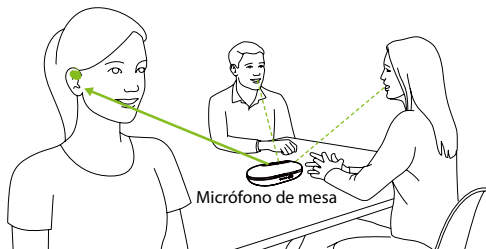

PASO 1


Mantenga presionado el botón "Hear Assist" durante 2 segundos en el micrófono de escritorio; el micrófono de escritorio entrará en modo de escucha, indicado por el LED parpadeando en AZUL.

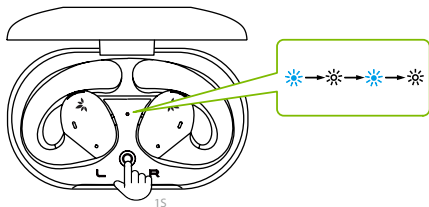

15

PASO 2

Espere unos segundos. El micrófono de escritorio y los auriculares se conectarán correctamente, como lo indica el LED de la carcasa que se vuelve AZUL fijo.

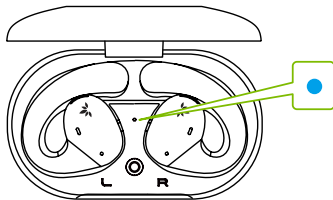

NOTA: El micrófono generalmente funciona dentro de un radio máximo de 10 metros/33 pies desde el amplificador de sonido. Tenga en cuenta que la presencia de personas o paredes puede reducir esta distancia. Para maximizar el alcance, asegúrese de poder ver el micrófono AucEar Pebble (siempre debe estar en su campo de visión).

Cambiar al Modo Bluetooth

Mantenga presionado el botón "Hear Assist" en el micrófono de escritorio durante 2 segundos para apagarlo. Los auriculares cambiarán automáticamente al modo Bluetooth. Luego puede seleccionar "Avantree AcuEar Pebble" en el menú Bluetooth de su dispositivo para conectarlos.

Usar como un Solo Auricular

Los auriculares izquierdo y derecho se pueden utilizar por separado. Cuando utilice un auricular monoaural (único), puede tocar el botón una vez para elegir entre 8 niveles de volumen.

ES

Especificaciones

Auriculares

Versión Bluetooth	v5.3
Códecs de audio compatibles	LC3, aptX-adaptive, aptX, SBC
Tiempo de reproducción	Hasta a 10 horas
Tiempo de reproducción con estuche de carga	Hasta a 35 horas
Tiempo de carga	2 horas
Driver	16.5mm
Impedancia	22Ω
Peso	26g

Micrófono de Escritorio y Estuche de Carga

Versión Bluetooth	v5.3
Códecs de audio compatibles	LC3
Tiempo de reproducción	Hasta a 56 horas
Tiempo de carga	2 horas
Peso	78g

FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

Los auriculares no se pueden conectar con el micrófono de mesa.

- Ingrese los auriculares al modo de emparejamiento: coloque los auriculares en el estuche y apague el Bluetooth de su teléfono móvil. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automáticamente, indicado por el LED parpadeando en AZUL y ROJO.
- Ingrese el estuche al modo de emparejamiento: mientras el estuche está apagado, presione y mantenga presionado el botón del estuche durante 5 segundos o hasta que el LED parpadee en AZUL y ROJO.
- Mantenga los auriculares y el estuche juntos y se conectarán entre sí.

Solo se escucha por un auricular/sonido de un lado

¿Cómo ajustar el volumen de los auriculares?

Puede encontrar una lista completa de preguntas frecuentes en avantree.com/support/acuear-pebble o contactarnos directamente para obtener más ayuda.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/acuear-pebble



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: PHA-126M

Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-126M-V1