

## Guida Video

Preferisci guardare un tutorial? Scansiona il codice QR o visita questa pagina: [avantree.com/medley-clear/video](https://avantree.com/medley-clear/video) per la guida passo passo.



VIDEOGUIDA

## Prendi un Appuntamento



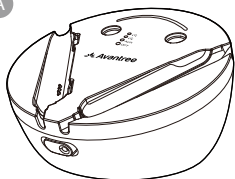
Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)

## Contenuti

<b>Contenuto della Confezione</b> .....	58
<b>Introduzione del Prodotto (Auricolari)</b> .....	59
Panoramica del prodotto.....	59
Funzione dei Tasti.....	59
Indicatori LED.....	60
<b>Introduzione del Prodotto (Trasmettitore e Base di Ricarica)</b> .....	61
Panoramica del Prodotto.....	61
Funzione dei Tasti.....	62
Indicatori LED.....	62
<b>Configurazione</b> .....	63
Collegamento alla TV.....	63
Opzione 1 - Uscita ottica (consigliata).....	63
Opzione 2 - Porta AUX da 3.5mm.....	64
Opzione 3 - Uscita RCA.....	64
Collegare le Cuffie al Trasmettitore.....	65
Impostazione della TV (SOLO PER CONNESSIONE OTTICA).....	67
<b>Funzioni Avanzate</b> .....	68
Ascoltare con una Soundbar.....	68
Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie.....	69
<b>Ricaricare le Cuffie</b> .....	70
<b>Specifiche</b> .....	71
<b>FAQ</b> .....	72
<b>Contact Us</b> .....	73


## Contenuto della Confezione

A




Trasmettitore Wireless  
& Base di Ricarica

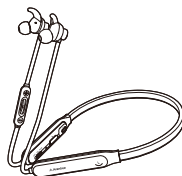B




Auricolari NB18T

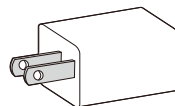C




Trasformatore USB

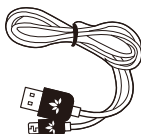D




Cavo di alimentazione  
USB per Trasmettitore

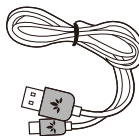E




Cavo di alimentazione  
USB per Cuffie

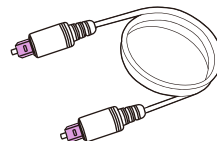F




Cavo Ottico

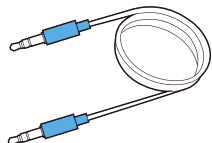G



Cavo AUX 3.5mm

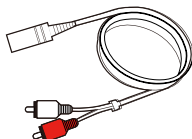H



Adattatore 3.5mm  
da AUX a RCA


I



Auricolari XS

# Introduzione del Prodotto (Auricolari)
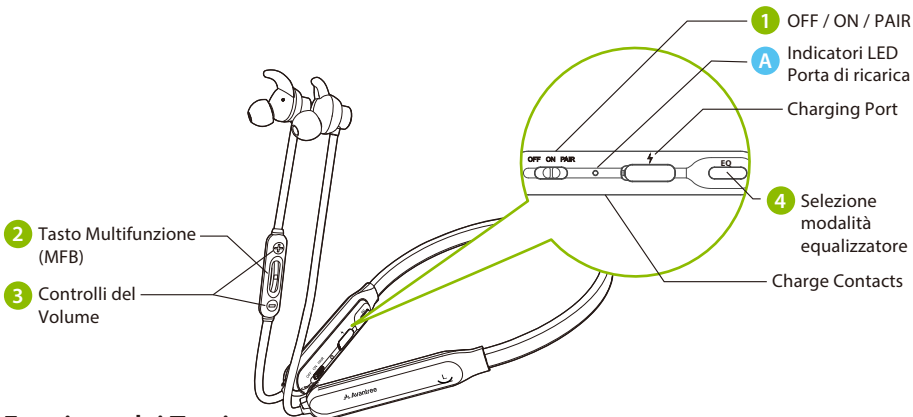
## Panoramica del prodotto



## Funzione dei Tasti

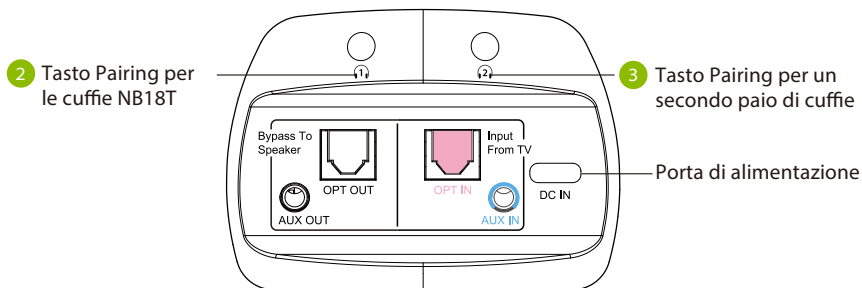
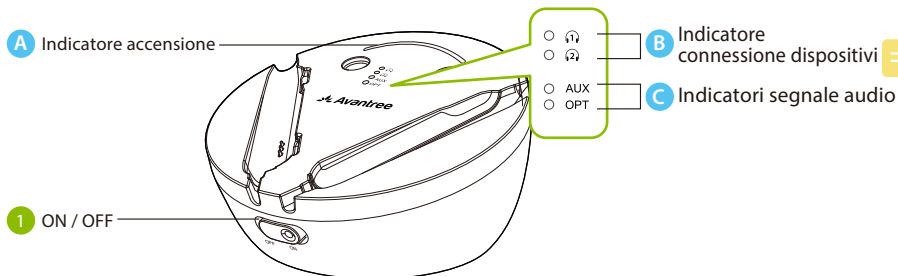
No.	Tasto	Funzione
1		Far scorrere l'interruttore verso il lato "OFF / ON / Pair" per spegnere / accendere / accedere alla modalità di associazione
2		Tocca una volta per riprodurre/mettere in pausa
		Tocca una volta per accettare/terminare la chiamata
		Tenere premuto per 2 secondi per rifiutare la chiamata
3		Toccare "+ / -" una volta per aumentare/diminuire il volume
		Tenere premuto "+ / -" per 2 secondi per saltare/ripetere la traccia
		Tenere premuti entrambi per 5 secondi per cancellare la cronologia degli accoppiamenti
4		Tocca una volta per alternare tra voce chiara e modalità normale

## Indicatori LED


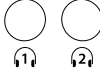






No.	Indicatori e Indicazioni Vocali	Stato
A	Blu fisso per 1 secondo	Accensione
	Rosso fisso per un secondo poi spento	Spegnimento
	Rosso fisso, indicatore vocale "LOW BATTERY"	Batteria scarica
	Rosso fisso	Ricarica
	LED spento	Ricarica completa
	Rosso e Blu lampeggianti, indicatore vocale "PAIRING"	Pairing
	Blu fisso, "CONNECTED" indicatore vocale	Connesso
	Blu lampeggiante ogni 5 secondi	Disconnesso
	Rosa fisso per 2 secondi poi rosso e blu lampeggianti	Storico connessioni cancellato

# Introduzione del Prodotto (Trasmettitore e Base di Ricarica)







## Panoramica del prodotto



## Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1		Spostare il tasto "ON / OFF" sulla posizione corrispondente per accendere o spegnere il trasmettitore
2		Premere e tenere premuto  per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione per gli auricolari NB18T. Premere e tenere premuto  per 5 secondi per collegare un secondo paio di cuffie.
3		Una volta connesso, tieni premuto per 8 secondi per bloccare le cuffie (  per le cuffie NB18T,  per il secondo paio di cuffie)
		Tenere premuti entrambi contemporaneamente per 5 secondi per cancellare la cronologia degli accoppiamenti
		Tocca  o  rispettivamente se uno degli auricolari non si riconnette automaticamente

## Indicatori LED

No.	Indicatori	Stato
A	Rosso fisso	Ricarica
	LED spento	Ricarica completa
B	 lampeggia blu ogni secondo	Acceso
	 blu fisso	Collegato alle cuffie NB18T
	 blu fisso	Collegato ad un secondo paio di cuffie
	 &  rosa fisso per 5 secondi poi  lampeggia blu ogni secondo	Storico connessioni cancellato
C	Blu fisso	Segnale audio valido
	Rosso lampeggia ogni secondo	Segnale audio non valido

## Configurazione

### Collegamento alla TV

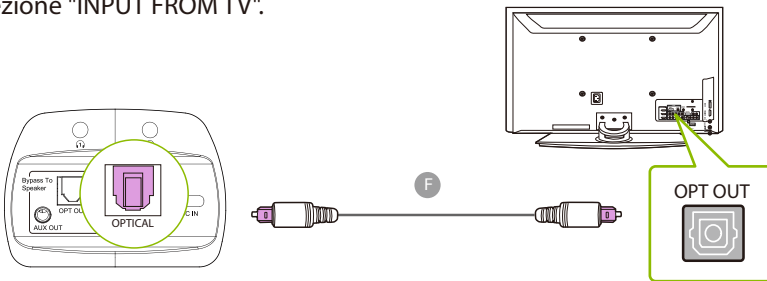
Per funzionare, la base del trasmettitore deve essere collegata a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione fornito. Collegare la base del trasmettitore a:

1. La porta di alimentazione USB di una TV, OPPURE
2. Una presa a muro nelle vicinanze - usando l'adattatore USB da 5V/500mA-2 A incluso (consigliamo questo metodo in che quando la base non è in uso possa continuare ad alimentare gli auricolari NB18T)

Una volta che la base del trasmettitore è collegata alla sua fonte di alimentazione, puoi collegarla alla TV. Puoi scegliere uno dei 3 diversi modi per farlo:

#### Opzione 1 : Uscita ottica (consigliata)

Collegare il cavo audio ottico in dotazione alla porta ottica OUT o OPT OUT del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".




*NOTA: La maggior parte dei televisori supporta l'uscita audio tramite una sola porta di uscita digitale alla volta, quindi se la porta HDMI ARC del televisore è in uso, la porta ottica potrebbe essere disabilitata. Puoi scollegare l'HDMI ARC o provare a collegare il trasmettitore tramite RCA / AUX.*




**Opzione 2 : Porta AUX da 3.5mm**

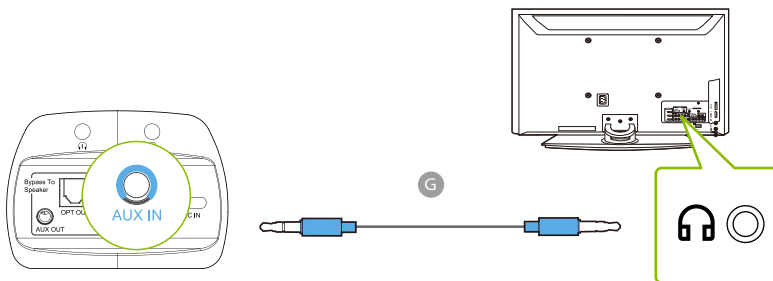Inserire il cavo audio AUX da 3,5 mm in dotazione nella porta di uscita AUX da 3,5 mm del televisore, quindi inserire l'altra estremità nella porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

**Opzione 3 : Uscita RCA**

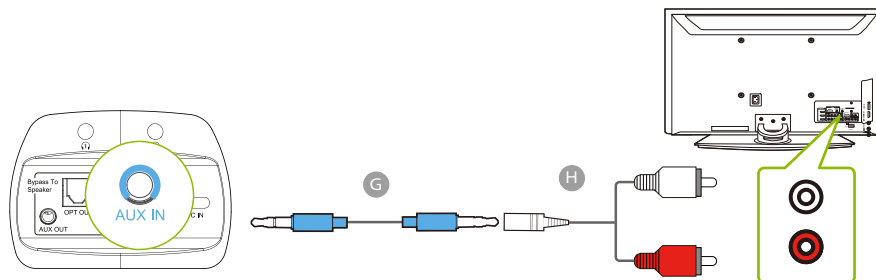
Collegare l'adattatore RCA fornito al cavo audio AUX da 3,5 mm. Collegare i connettori RCA rosso e bianco alle porte "AUDIO OUT" della TV, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".



## Collegare le Cuffie al Trasmettitore

Ora che il trasmettitore è configurato, puoi collegare gli auricolari NB18T al trasmettitore.


### PASSO 1

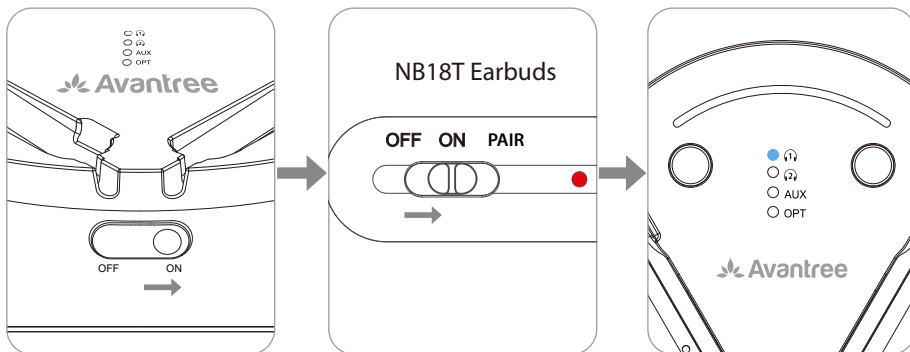
Accendere il trasmettitore mettendo il tasto OFF  ON sulla posizione "ON".


### PASSO2

Rimuovere gli auricolari NB18T dal dock del trasmettitore, quindi posizionare l'interruttore di accensione/spegnimento/accoppiamento su "ON" per accendere gli auricolari.

### PASSO 3

Attendere qualche secondo e gli auricolari NB18T si collegheranno automaticamente al trasmettitore. Una volta connesso, entrambi gli indicatori LED sull'auricolare e  sul trasmettitore diventeranno BLU fisso.



*NOTA 1: Per un utilizzo successivo, se gli auricolari NB18T non riescono a riconnettersi con il trasmettitore, è possibile avviare manualmente la  riconnessione toccando una volta il pulsante del trasmettitore e attendendo alcuni secondi.*

*NOTA 2: Alcune smart TV cercheranno automaticamente e proveranno ad accoppiarsi con qualsiasi dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. Se la tua TV ti chiede di connettere le tue cu e Bluetooth o Medley Clear, "NEGA" la richiesta in modo che il tuo dispositivo possa*

**Avantree Medley Clear**

Your permission is required  
to connect your device to TV.

Allow

**Deny**

Close

## Impostazione della TV (SOLO PER CONNESSIONE OTTICA)OPTIQUES)

Se ti sei connesso alla TV tramite l'uscita ottica o la porta "OPT OUT", dovrai configurare le impostazioni della TV prima di ricevere l'audio.

### PASSO 1

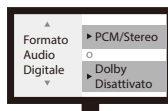
Utilizzando il telecomando della TV, premere il pulsante IMPOSTAZIONI e accedere alla scheda AUDIO all'interno del menu delle impostazioni. (Si noti che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

### PASSO 2

Passare a USCITA AUDIO e selezionare "USCITA OTTICA / USCITA DIGITALE". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

### PASSO 3

Impostare il formato di uscita audio su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.



Falls Sie Schwierigkeiten haben, diese Einstellungen zu finden, können Sie den QR-Code scannen, der mit der Marke Ihres Fernsehers korreliert, ODER [avantree.com/medley-clear/tv-audio-settings](http://avantree.com/medley-clear/tv-audio-settings) besuchen, um eine detailliertere Anleitung zu erhalten.



LG



SONY



SAMSUNG



NETFLIX /  
AMAZON PRIME

*NOTA 1: Le Smart TV ripristinano automaticamente le impostazioni dopo gli aggiornamenti di sistema. Assicurati che il formato di uscita/ingresso audio sia impostato su "PCM" e NON su "AUTO" o "Dolby".*

*NOTA 2: Quando si utilizza Netflix o Amazon Prime, potrebbe essere necessario avviare il film/programma prima di modificare le impostazioni audio su "PCM".*

## Funzioni Avanzate

### Ascoltare con una Soundbar

La funzione pass-through di Medley Clear ti consente di ascoltare simultaneamente attraverso le cuffie e una soundbar esterna/AVR stereo.

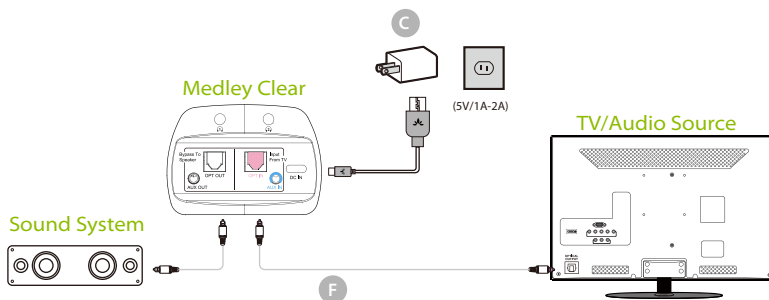
1

#### PASSO 1

Collegare un cavo audio ottico aggiuntivo, AUX da 3,5 mm o RCA alla porta audio correlata nella sezione "BYPASS TO SPEAKER" del trasmettitore.

#### PASSO 2

Collega l'altra estremità al tuo sistema audio esterno, quindi sei a posto.



*Nota: Il Bypass funziona solo con lo stesso tipo di ingresso/uscita, ovvero se ti connetti alla TV tramite OPT, dovrai connetterti anche al tuo altoparlante tramite OPT.*



## Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie

Se lo desideri, puoi connetterti e ascoltare simultaneamente usando due paia di cuffie. Visita [avantree.com/medley-clear/video](https://avantree.com/medley-clear/video) se preferisci guardare una guida video su questo processo.

### PASSO 1

Collegare gli auricolari NB18T al trasmettitore seguendo i passaggi della sezione "Collegamento delle Cuffie al trasmettitore" (pagina 11).


### PASSO 2

Una volta collegati correttamente gli auricolari NB18T, metti il trasmettitore in modalità PAIRING tenendo premuto il tasto  finché il LED  inizia a lampeggiare in ROSSO e BLU alternati.


### PASSO 3

Metti il tuo secondo paio di cuffie Bluetooth in modalità PAIRING. Consultare il manuale utente delle cuffie per ulteriori dettagli, se necessario.

### PASSO 4

Tieni il trasmettitore e il secondo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi o finché non si connettono. Una volta collegate, il LED  diventa BLU fisso.

*NOTA: per riconnettersi facilmente al secondo paio di cuffie, è possibile bloccare la connessione del secondo paio di cuffie al trasmettitore tenendo premuto il pulsante per 8 secondi. Il LED diventerà rosa fisso per 5 secondi, indicando che sono stati bloccati con successo.*

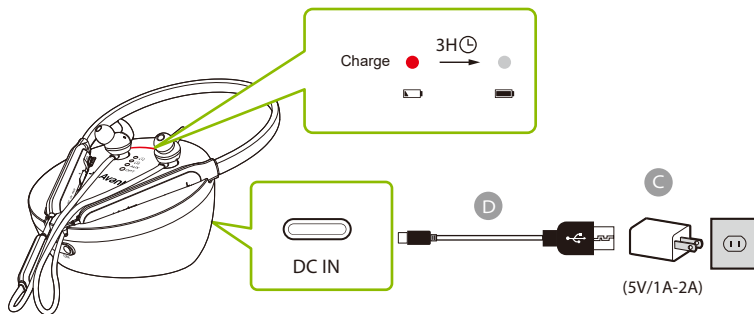
*Per un utilizzo successivo, assicurati che il secondo paio di cuffie non sia collegato a un altro dispositivo. Quindi, accendi le cuffie e fai clic sul  pulsante una volta. Il trasmettitore Medley Air si ricollegherà automaticamente al tuo secondo paio di cuffie.*

## Ricaricare le Cuffie

Il LED sugli auricolari diventerà rosso fisso per indicare che la batteria è scarica. Puoi scegliere 2 diversi modi per ricaricare le cuffie:


### Opzione 1 : Ricaricare tramite la base

Collega la base del trasmettitore a una presa a muro con l'adattatore da parete USB incluso, quindi metti gli auricolari sul dock per ricaricarli. Le luci rosse fisse su entrambi gli auricolari e sul trasmettitore indicano che la ricarica è in corso; una volta che le luci si spengono, gli auricolari saranno completamente carichi.



### Opzione 2 : Ricarica diretta con cavocâble

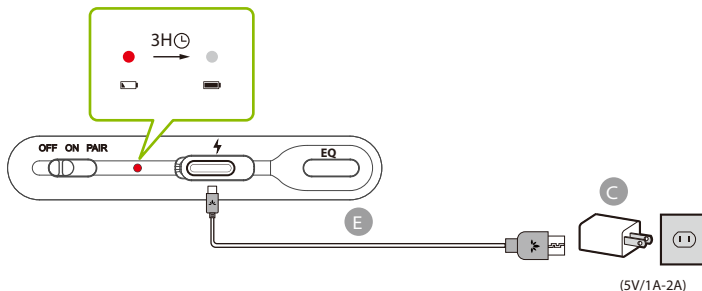Collega il cavo di ricarica di tipo C incluso nella confezione alla porta di ricarica degli auricolari, quindi collega l'altra estremità a una presa tramite l'alimentatore USB incluso nella confezione o a una porta USB del PC.



## Specifiche

### Trasmettitori

Versione Bluetooth	v5.0
Audio codec supportato	aptX-Low Latency, aptX, FastStream, SBC
Profili supportati	A2DP, AVRCP
Raggio operativo	Fino a 100ft / 30m
Frequenza di Campionamento Supportata in Modalità Ottica	48KHz, 16bit
Formato Audio Supportato in Modalità Ottica	PCM / LPCM
Porta di Ricara	Type C
Ingresso nominale	DC5V/500mA~2.0A
Peso	206g

### Cuffie

Versione Bluetooth	v5.0
Audio codec supportato	FastStream, SBC
Profili supportati	A2DP, AVRCP, HFP
Raggio operativo	Fino a 30ft / 10m
Riproduzione	Fino a 20 ore
Tempo di ricarica	~1.5hrs
Drivers	16.2mm
Porta di Ricara	Type C
Ingresso nominale	DC5V/500mA~2.0A
Peso	53g



## FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione.

### **Posso ascoltare l'audio contemporaneamente dagli altoparlanti della TV e dalle cuffie wireless?**

Questo dipende esclusivamente dal fatto che la TV supporti o meno la possibilità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare alcuni metodi diversi per verificare se la tua TV è in grado di farlo o meno - fai riferimento a [avantree.com/medley-clear/sound](https://avantree.com/medley-clear/sound).

### **Perché gli auricolari non si adattano bene? Sono troppo grandi/piccoli!**

Il Medley Clear viene fornito con diverse dimensioni di punte degli auricolari. Se ritieni che gli auricolari non si riempiano bene nell'orecchio, cambia le punte degli auricolari di conseguenza per trovare l'abito migliore. Se pensi che siano troppo grandi, abbiamo anche i gommini XS.

### **Perché le mie cuffie non si collegano? Perché non ricevo audio dalle mie cuffie?**

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo di domande frequenti, puoi visitare [avantree.com/support/medley-clear](https://avantree.com/support/medley-clear), oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.


## Contattaci

 **Supporto ticket** [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---

 **Email di supporto** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri )  
**UK** +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)  
**DE** +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**FR** + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**IT** +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**ES** + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**AU** + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

---

 **Domande frequenti (FAQ)** [avantree.com/support/medley-clear](https://avantree.com/support/medley-clear)

---

 **Video** [avantree.com/medley-clear/video](https://avantree.com/medley-clear/video)

---

 **Registrazione del prodotto** [avantree.com/product-registration](https://avantree.com/product-registration)